

**스타일레토 커넥트  
충전기 LED 표시**

Styletto Connect  
Charging Case  
LED Status



'스타일레토 커넥트, 스타일레토 충전기

✓ 충전기 색상  
- 제품별로 단일 색상

호환제품	
충전횟수	
급속충전	
LED 상태 표시등	충전기 보청기



스타일레토 커넥트  
7, 5, 3

3회

가능

외부 전면부  
내부 슬롯



스타일레토 2, 1

1회

가능

외부 전면부: 가운데  
외부 전면부: 양 옆

'스타일레토 커넥트' 충전기에서 **충전 상태** 확인하기!



충전기가 전원 케이블에 연결되어 있을 때

외부 전면등

LED 불빛 표시	충전기 충전 상태
깜빡	충전기: 충전 중
유지	충전기: 완충

충전기 내부 슬롯 상태등



LED 불빛 표시	보청기 충전 상태
깜빡	보청기: 충전 중
유지	보청기: 완충

'스타일레토 커넥트' 충전기에서 충전 상태 확인하기!



충전기가 전원 케이블에 연결되어 있지 않을 때

외부 전면등

LED 불빛 표시

충전기 배터리 용량 상태

유지

충전기: 충분한 용량 / 보청기 완충 가능

유지

충전기: 불충분한 용량 / 보청기 완충 미지수

깜박

충전기: 잔여 용량 없음 / 보청기 충전 불가능

충전기 내부 슬롯 상태등



LED 불빛 표시

보청기 충전 상태


깜박

보청기: 충전중

유지

보청기: 완충

## '스타일레토 커넥트' 충전기 여는 방법

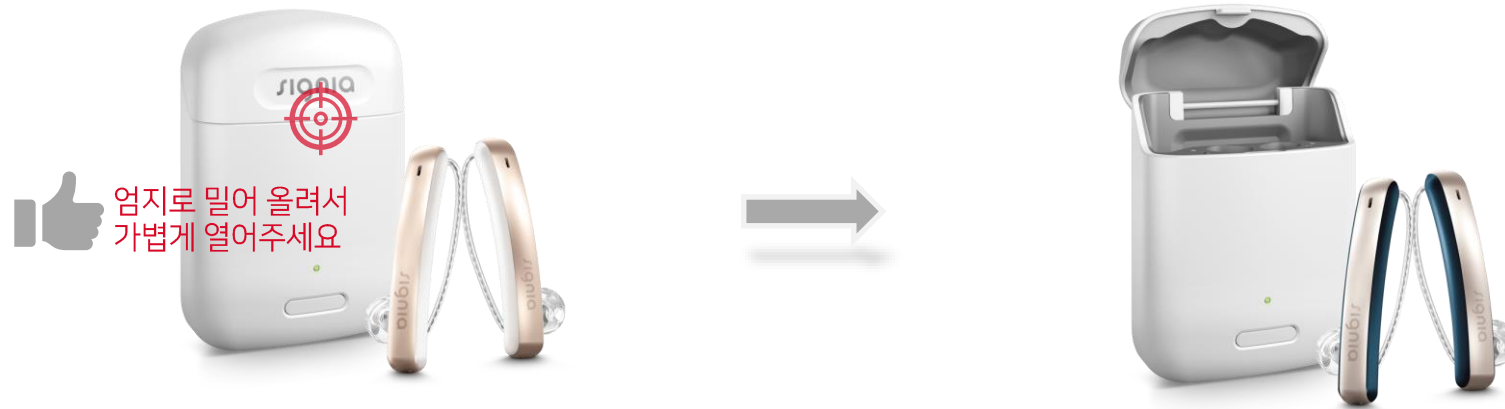

※ 스타일레토 커넥트 충전기는 스타일레토 2 & 1 충전기와 다릅니다.

'스타일레토 커넥트' 충전기 주문번호  
10962036

